



# Evolution PSV™

Das Kissen der Wahl für RollstuhlbenutzerInnen mit Dekubitus-Risiko. Für RollstuhlfahrerInnen, welche eine einfache symmetrische Sitzpositionierung benötigen.

SITZSYSTEM

Spezialisten empfehlen das Evolution PSV Kissen für Personen mit motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Rückenmarksverletzungen, Multiple-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen. Evolution PSV wird aufgrund der hervorragenden Druckverteilung und der Haltungsunterstützung sehr geschätzt.

Sein leichtes Gewicht, der Komfort und die Benutzerfreundlichkeit machen es zum Kissen der Wahl.



## Evolution PSV™

	30 x 36	36 x 36	36 x 40	40 x 40	40 x 45	40 x 50	42.5 x 42.5
Mit Standard Bezug	72415	74415	74615	76615	76815	76015	77715
Mit Inkontinenz Bezug	72425	74425	74625	76625	76825	76025	77725
	45 x 40	45 x 45	45 x 50	50 x 40	50 x 45	50 x 50	
Mit Standard Bezug	78615	78815	78015	70615	70815	70015	
Mit Inkontinenz Bezug	78625	78825	78025	70625	70825	70025	

# Evolution PSV™

Die überlegene Druckverteilung, Positionsstabilität, der Komfort und die Einfachheit haben das Evolution PSV Kissen zum meistverwendeten Rollstuhlkissen gemacht.

Durch die Weiterentwicklung des Ventils zum PSV (Pressure Setting Valve) System wird das Evolution PSV Kissen noch besser und noch einfacher anpassbar.

Die **VARILITE** Luft-Schaumstoff Zirkulation macht das Evolution PSV sehr leicht, ohne dass die Druckverteilung und die Unterstützung dabei vernachlässigt werden.

## 1. Luft-Schaumstoff Zirkulation

Für die Funktion des Kissens werden drei Arten von Schaumstoff angewendet; weicher Schaumstoff für den dekubitusempfindlichen Bereich; mittelweicher Schaumstoff für die Oberschenkelführung, gegen Beckenschiefstand und zur Beckenstabilisierung; harter Schaumstoff für die Sitzkontur und Adduktionsunterstützung

Das Evolution Schaumstoff-Kissen ist luftdicht versiegelt, sodass Luft nicht ausweichen kann. Durch das PSV-Ventil kann der Benutzer gezielt Luft aus dem Sitzkissen ausströmen lassen. Dadurch tauchen die Sitzknochen in den Sitz ein, der Körper wird unterstützt und eine optimale Gewichts- und Druckverteilung wird gewährleistet.

Unabhängige Studien haben gezeigt, dass Feuchtigkeit verhindert wird und Erschütterungen optimal abgefangen werden.

## 2. Positionsunterstützung

Positionsunterstützung heisst, Sitzstabilität optimieren. Dies ist sehr wichtig für jeden Benutzer, der eine kompromisslose Sitzbalance haben möchte oder der oft transferiert. Die verschiedenen Schaumstoffdichten unterstützen zum einen die Sitzhaltung und lassen gleichzeitig die Sitzknochen in das Kissen eintauchen. Mit Hilfe der Adduktionskeile und des Abduktionskeils bleiben die Beine in der möglichst optimalen Haltung. Durch die Unterstützung im Beckenbereich wird eine aufrechte Körperhaltung gefördert.


## 3. Spezial-Stretch Material

Der Evolution Schaumstoff ist umschlossen von einem Innen-Stretch Bezug, welcher für eine maximale Anpassung während des Sitzens auf dem Kissen sorgt (stichfest & wasserundurchlässig).

## 4. Ventil zur Einstellung des Luftvolumens

Das neue, dreistufige Ventil PSV ist der Schlüssel zum revolutionären Luft-Druck-Ventil-System von VARILITE.

Die zuvor evaluierte Stufe 1, 2 oder 3 wird eingestellt, der Benutzer setzt sich auf das Kissen und die Luft strömt automatisch bis zur gewünschten Vakuumstärke aus.

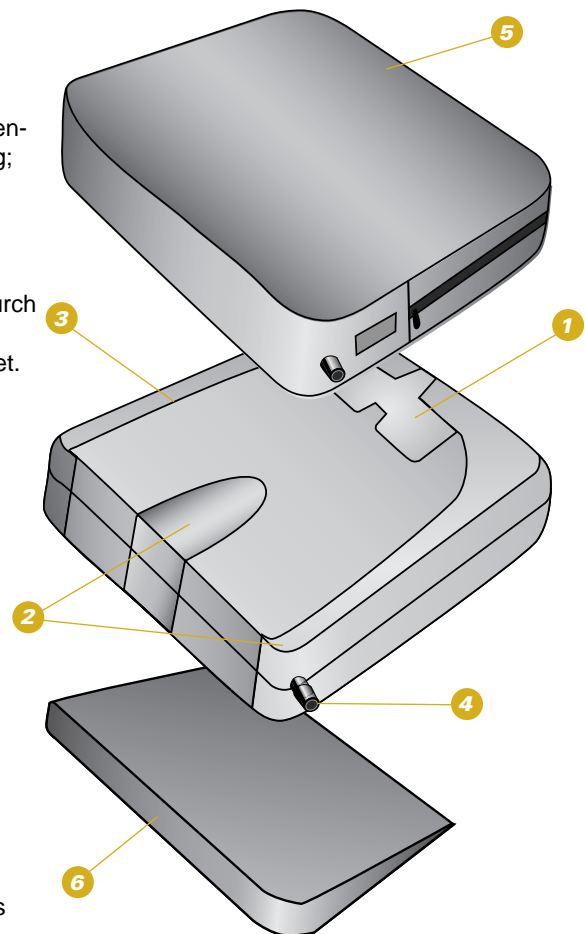

## 5. Überzug

Das Evolution ist mit einem Standard- oder einem Inkontinenzüberzug verfügbar. Eingearbeiteter Schaumstoff in den Überzug optimiert die Luftzirkulation und fördert die Druckverteilung.

Die Unterseite ist gummiert, rutschfest und mit Klettbanden versehen.

Der Überzug ist in der Maschine waschbar.

## 6. Schaumstoffkeil

Ein modifizierbarer Schaumstoffkeil ist ohne Aufpreis für jedes Evolution PSV erhältlich.